



SICUREZZA AD OGNI PASSO

CareMat

LO SCENDILETTO SENSIBILE ALLA PRESSIONE NEL SETTORE ASSISTENZIALE

APPLICAZIONE

La cura di pazienti affetti da demenza e con problemi di deambulazione rappresenta una sfida notevole per il personale addetto all'assistenza. Si tratta di non limitare inutilmente la libertà di movimento delle persone assistite, al fine di preservare la loro qualità della vita e mantenere un'autonomia idonea. Lo scendi-letto sensibile alla pressione CareMat offre un supporto importante in tal senso.



Ambiti di applicazione ■ Strutture per anziani e case di cura, ospedali, cliniche, cliniche psichiatriche, alloggi sorvegliati e assistenza domiciliare

Installazione ■ Collegamento semplice all'impianto di chiamata infermiera
■ In genere davanti al letto del paziente o alla porta della stanza

Caratteristiche ■ Trasmissione del segnale affidabile
■ Impiego flessibile
■ Superficie stabile e antiscivolo
■ Materiale igienico di facile pulizia
■ Maniglie per manipolazione agevole
■ Alloggiamento pratico per la versione con cavo o via radio
■ Struttura robusta e di lunga durata

Vantaggi per il personale curante ■ Prevenzione delle cadute grazie alla possibilità di intervento rapido
■ Riduzione dei giri di controllo notturni
■ Costi consequenziali inferiori per il sistema sanitario

Vantaggi per l'ospite o il paziente ■ Massima libertà di movimento
■ Senso di sicurezza grazie al dispositivo di protezione visibile
■ Miglioramento della qualità della vita

VITA QUOTIDIANA IN UNA STRUTTURA ASSISTENZIALE

Nelle strutture assistenziali CareMat fornisce un contributo sostanziale per preservare la qualità della vita degli ospiti, inoltre offre un supporto prezioso al personale curante. Il CareMat viene posizionato semplicemente davanti al letto del paziente o alla porta della stanza, quindi viene collegato all'impianto di chiamata infermiera della struttura via cavo o via radio. Non appena la persona calpesta il tappeto, il CareMat attiva il segnale agli operatori, minimizzando considerevolmente il rischio di cadute così come il pericolo che qualcuno abbandoni la struttura o si perda.

1



Le persone affette da demenza sono spesso irrequiete, perdono facilmente l'orientamento e spesso cercano di alzarsi di propria iniziativa.

2



In tal senso il CareMat offre una protezione affidabile. Non appena calpestato, il CareMat attiva il segnale di chiamata infermiera della struttura, così il personale curante può recarsi tempestivamente a fornire assistenza.

3



L'intervento tempestivo del personale curante può scongiurare eventuali cadute. In questo modo si evitano anche gli allontanamenti dalla struttura.

4





CareMat – l'aiuto affidabile per il personale curante e gli ospiti.

DATI TECNICI

Il CareMat viene posizionato davanti al letto del paziente o alla porta della stanza. È disponibile in versione con cavo o via radio. Il cavo o la batteria del trasmettitore radio sono facilmente sostituibili.

- CareMat A** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 8,2 kg
- CareMat B** ■ 700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg
- CareMat C** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg
- Materiale** ■ Poliuretano
- Superficie** ■ Struttura a bolle
- Colore** ■ Careyellow, Caregrey
- Uscita contatto** ■ Cavo: Contatto di lavoro o di riposo, circuito di resistenza
- Radio: Protocollo radio specifico del produttore
- WLAN: Integrazione in rete tramite Asset Tag
- Collegamento** ■ Viene allestito appositamente dal rivenditore per il proprio impianto di chiamata

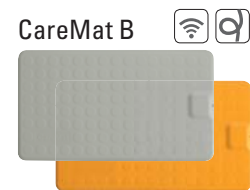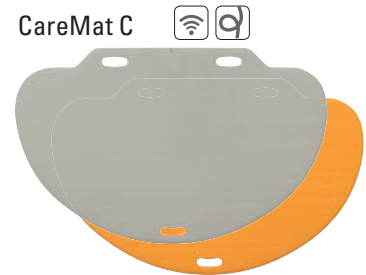

IL VOSTRO PARTNER AFFIDABILE

BBC Bircher Smart Access, con sede principale a Beringen in Svizzera, è un produttore, leader a livello mondiale, di sistemi con sensori sensibili alla pressione e al contatto che garantiscono la sicurezza per persone, veicoli e impianti in presenza di porte, portoni e cancelli automatici, nell'industria, nel trasporto pubblico e nel settore sanitario.



Rivenditore CareMat

Produttore CareMat

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tel. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch
info@bircher.com