



SÄKERHET PÅ GÅNG

CareMat

DEN TRYCKKÄNSLIGA SENSORMATTAN INOM VÅRDEN

ANVÄNDNING

Vård av människor med demens och patienter som riskerar att ramla eller irra iväg innebär stora utmaningar för vårdarna. Det gäller att inte begränsa vårdtagarnas rörelsefrihet onödigt mycket, så att deras livskvalitet upprätthålls och låter dem vara självständiga inom lämpliga gränser. Den tryckkänsliga sensormattan CareMat utgör ett värdefullt stöd.



Användningsområde ■ Äldreboenden, vårdhem, sjukhus, kliniker, psykiatriska mottagningar, gruppboenden och hemtjänst

Installation ■ Enkel anslutning till husets larmsystem
■ Oftast framför vårdsängen eller rumsdörren

Egenskaper ■ Pålitlig larmsensor
■ Kan användas mobilt
■ Halksäker ovansida
■ Lätt att rengöra och gjord av hygieniska material
■ Bärhandtag för enkel hantering
■ Praktisk enhet för kabelutförande eller trådlöst utförande
■ Robust och hållbar konstruktion

Fördelar för vårdare ■ Fallolyckor förhindras tack vare raskt ingripande
■ Färre kontroller på natten
■ Lägre följdkostnader för sjukvården

Fördelar för den boende eller patienten ■ Obegränsad rörelsefrihet
■ Känsla av säkerhet tack vare synlig skyddsanordning
■ Förbättrad livskvalitet

VARDAGSSITUATION PÅ EN VÅRDINRÄTTNING

På vårdinrättningar bidrar CareMat avsevärt till att upprätthålla de boendes livskvalitet och är till stor hjälp för vårdpersonalen. CareMat läggs framför vårdsängen eller positioneras framför rumsdörren och ansluts via kabel eller trådlöst till husets larmsystem. När någon går på mattan utlöses omedelbart en signal till vårdaren. Risken för fall och andra faror som uppstår när patienter irrar iväg eller går vilse kan minskas avsevärt.

1



Människor med demens är oroliga och rastlösa. De försöker ofta att ställa sig upp utan hjälp.

2



Här erbjuder CareMat ett pålitligt skydd. När någon sätter ner foten på CareMat utlöses husets larmsystem. På så sätt kan personalen snabbt infinna sig och hjälpa till.

3



Tidigt ingripande från vårdaren kan förhindra att patienten ramlar. På samma sätt kan man förhindra att vårdtagaren lämnar rummet utan tillsyn.

4



CareMat – den pålitliga assistenten för vårdpersonal och boende.

TEKNISKA DATA


CareMat kan användas framför vårdsängen eller rumsdörren och finns därför i kabelbundet eller trådlöst utförande. Kabeln och batteriet för trådlöst utförande är enkla att byta.

- CareMat A** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 8,2 kg
- CareMat B** ■ 700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg
- CareMat C** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg
- Material** ■ Polyuretan
- Yta** ■ Halkfri struktur
- Färg** ■ Careyellow, Caregrey
- Kontaktutgång** ■ Kabel: Normalt öppen eller normalt stängd kontakt, motståndskoppling
 - Trådlös: Tillverkarspecifikt radioprotokoll
- Integrering** ■ Anpassas till din kommunikationsanläggning av din återförsäljare

CareMat A  



CareMat C  

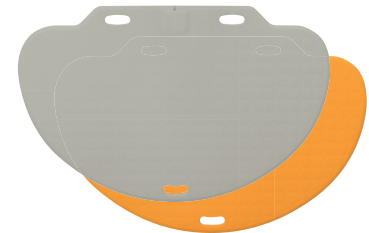

CareMat B  



DIN PÅLITLIGA PARTNER

BBC Bircher Smart Access med säte i Beringen, Schweiz, är en internationellt ledande tillverkare av tryckkänsliga och beröringsfria sensorsystem som sörjer för säkerhet för människor, fordon och anläggningar i automatiska dörrar och portar, inom industrin, kollektivtrafiken och vården.



Din CareMat återförsäljare i Europa

meta-care GmbH
Akazienhofstraße 20
A-9020 Klagenfurt

Tel. +43 5 1721 0
Fax +43 5 1711 6200
www.meta-care.eu
office@meta-care.eu

Med filial i Schweiz

Din CareMat tillverkare och återförsäljare för alla andra länder

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tel. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch
info@bircher.com